



SISTEMA PER IL CONTROLLO ECOGRAFICO DELLA PROCEDURA

OVUM PICK UP



Sistema per il controllo ecografico della procedura Ovum Pick Up

Una soluzione moderna per ampliare l'offerta nell'ambito della riproduzione e aumentare la completezza dei servizi veterinari per gli allevatori di cavalli e bovini.

CHE COS'È L'OPU?

L'Ovum Pick Up (OPU) è una delle tecniche in più rapida crescita nel campo della biotecnologie della riproduzione degli animali. Aiuta a migliorare il valore genetico della mandria. Il prelievo del materiale viene effettuato su donatori con le migliori qualità genetiche, al fine di aumentare il numero annuale di figli. Durante la procedura di prelievo dell'ovulo (dall'ovaio sotto controllo

ecografico) lo specialista utilizza un dispositivo per OPU. La qualità degli ovociti viene valutata al microscopio, le cellule migliori vengono selezionate per la fecondazione in vitro e gli embrioni vengono poi trasferiti alle riceventi. La procedura è considerata sicura e può essere ripetuta più volte.

Il sistema OPU è compatibile con diversi modelli di ecografi Dramiński



iScan 2 MULTI

iScan 3

4Vet Slim

BLUE



Dispositivo multifunzionale Dramiński per OPU

**Dramiński - OPU con sonda microconvessa.
Consigliato per il prelievo di ovociti da cavalle.**

- compatibile con molti tipi di aghi, da quelli da iniezione 20G a quelli 12G a doppio lume, nonché con una gamma completa di tubicini e provette necessari per il processo di prelievo del materiale
- realizzato in plastica leggera e facile da pulire
- veloce da montare e smontare
- campo visivo della sonda a ultrasuoni microconvessa: 136 gradi




Sistema OPU integrato (Monoblock)

Il sistema OPU è composto da una sonda microconvessa con frequenza 4-9 MHz, impugnatura, guida dell'ago.



**Monoblock - OPU con sonda integrata.
Consigliato per il prelievo di ovociti dalle
giovenche.**

L'indicatore del percorso dell'ago nell'ecografo aumenta la precisione della procedura di aspirazione degli ovociti

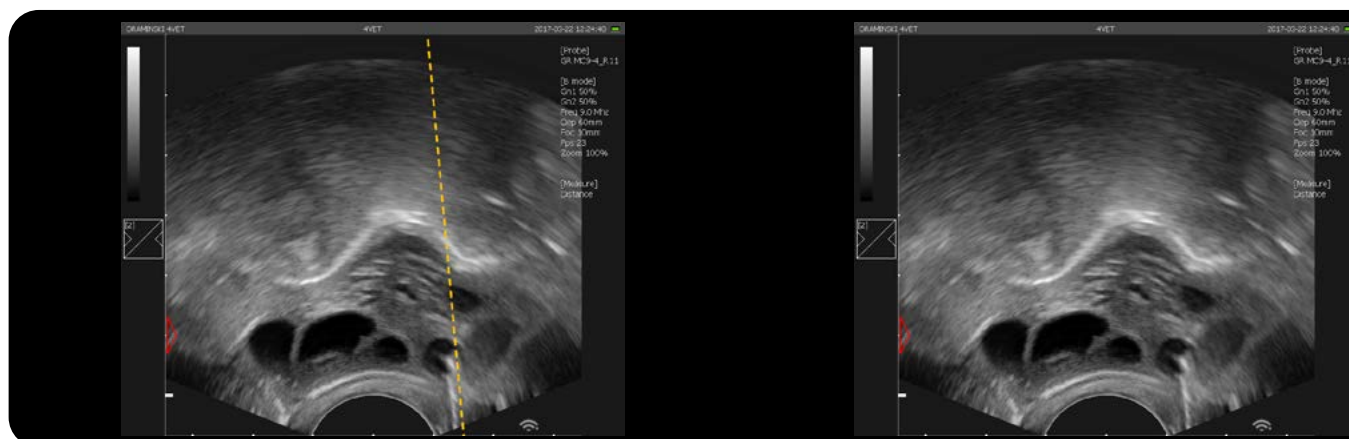

Kit indispensabile:

- prolunga per OPU in due parti
- guida, stabilizzatore e impugnatura
- boccola di stabilizzazione del percorso dell'ago
- punte per diversi tipi di aghi
- viti di fissaggio, cacciavite e brugola
- sonda microconvessa



SPECIFICHE TECNICHE:	Dramiński OPU	Monoblock
Lunghezza	625 mm	610 mm
Larghezza alla sonda	30 mm	21 mm
Altezza alla sonda	44 mm	30 mm
Peso con la sonda	700 g	765 g
Tipo di aghi raccomandati	Vacche: 20-18G / 70 mm 20G per le giovenche Cavalli: 12G a doppio lume	
Ecografi dedicati Dramiński	BLUE 4Vet Slim iScan 2 Multi iScan 3	

Ti interessa lo sviluppo nel campo della riproduzione di animali di grossa taglia?

Abbiamo preparato un'offerta formativa con specialisti nella riproduzione assistita di cavalli e bovini. Imparerai la tecnica e il modo di preparazione della postazione per la procedura OPU. I nostri relatori ti spiegheranno i dettagli relativi all'ecografia e alla parte di laboratorio. Collaboriamo con aziende leader nella fornitura di pompe, articoli monouso e attrezzature di laboratorio. Siamo presenti in tutti i continenti.



Contattaci per maggiori informazioni.

 +39 347 25 08 499 @ marcello@draminski.com



VEDI ALTRO

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

 +39 347 25 08 499  marcello@draminski.com

Seguici:    

www.draminski.com