

IMMAGINI DIAGNOSTICHE



VEDI ALTRO

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polonia

+48 89 675 26 00 @ sales@draminski.com


Seguici:

www.draminski.it

v.1987150526IT

DRAMINSKI
TECHNOLOGY

ECOGRAFO PORTATILE

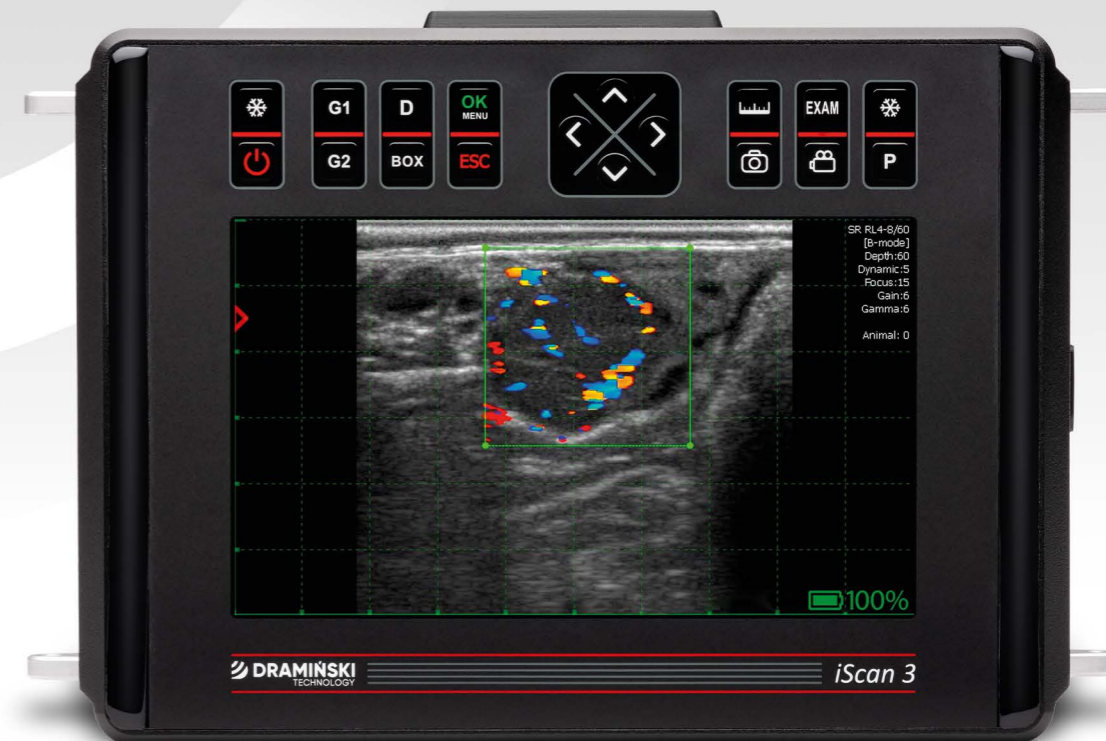

iScan 3

Versatile e moderno

www.draminski.it

iScan3

ECOGRAFO PORTATILE



VERSATILITÀ

Una gamma di sonde compatibili in continua espansione offre flessibilità nell'approccio al paziente. L'iScan 3 è utilizzato per:

- Esami del sistema riproduttivo
- Diagnostica del flusso sanguigno del corpo luteo
- Diagnosi e monitoraggio della gravidanza
- Determinazione della vitalità e del sesso del feto
- Esami dei polmoni, del sistema digestivo, della mammella e del sistema locomotorio

Una sonda particolare consente anche l'esecuzione di procedure OPU

DOPPLER A COLORI

La modalità di imaging con Doppler a colori consente la diagnosi dell'attività del corpo luteo già a 18-20 giorni dopo l'inseminazione. Questo permette di identificare le vacche che non sono state fecondate prima che si verifichi il prossimo ciclo estrale. L'attivazione istantanea e le impostazioni ottimizzate garantiscono comodità e facilità d'uso.

TRASFERIMENTO DELLE IMMAGINI CON IL WIRELESS

Il modulo WiFi integrato consente il trasferimento wireless delle immagini ecografiche su tablet, telefoni e occhiali iLens. I proprietari degli animali o gli studenti possono visualizzare l'immagine in diretta da una distanza sicura, aumentando l'accessibilità e la comodità.


ERGONOMIA MIGLIORATA

Le funzioni principali sono accessibili dalla tastiera. Le scorciatoie dedicate accelerano il lavoro, con le misurazioni utilizzate di recente impostate come predefinite. È inoltre possibile personalizzare le descrizioni per adattarle alle proprie preferenze.



iScan 3
Il tuo strumento per la diagnostica veterinaria avanzata

Dimensioni: 27 x 18 x 7 cm
Peso: 2,6 kg con sonda e batteria

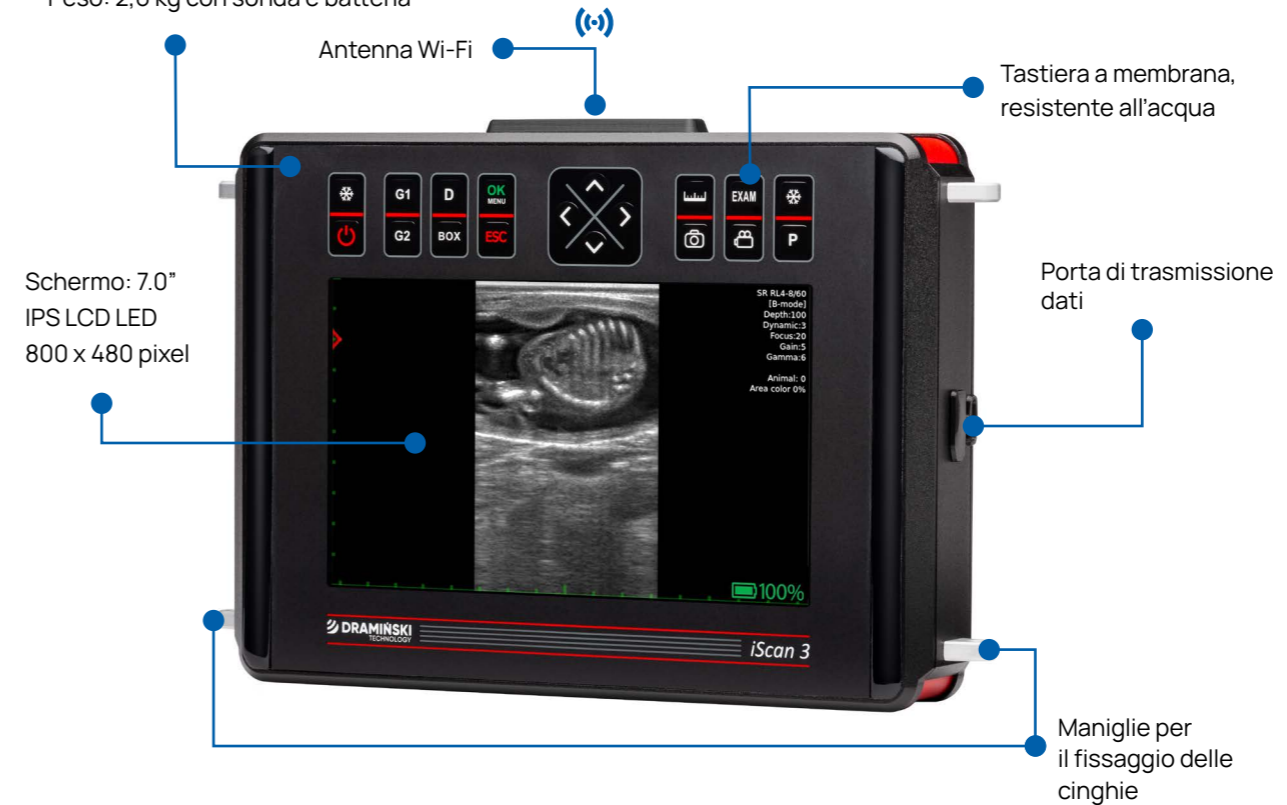

Copertura della porta della sonda



Autonomia di funzionamento continuo a ricarica completa: fino a 4 ore



iScan 3



Incluso nel set:

- Ecografo portatile **iScan 3**
- Sonda ecografica a scelta*
- Batteria
- Caricabatteria
- Cinghie per l'ecografo
- Valigia di trasporto
- Manuale dell'utente (USB)

* Si prega di scegliere prima dell'acquisto il tipo

- Sonda elettronica, a banda larga, intercambiabile:
- 156 - Convessa 5,0 MHz R50
 - 181/A - Microconvessa 6,5 MHz R11
 - 196 - Lineare addominale 8,0 MHz L40
 - 212 - Convessa rettale 5,0 MHz R60
 - 223 - Lineare rettale 7,0 MHz L60

